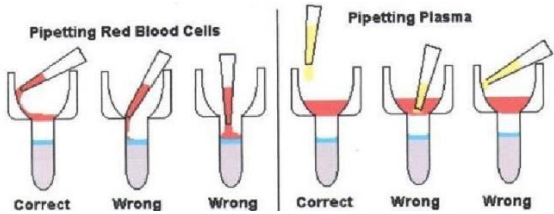


 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CROSSMATCH		
	No. Dokumen 1373.4/I-SPO/DIR/XI/2024	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 04 November 2024	Ditetapkan Oleh : PLT Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah
Pengertian	Proses Crossmatch adalah pemeriksaan utama yang dilakukan sebelum transfusi yaitu memeriksa kecocokan antara darah pasien dan donor sehingga darah yang diberikan benar-benar cocok.	
Tujuan	Untuk mengetahui apakah sel darah merah donor bisa hidup di dalam tubuh pasien, dan utnuk mengetahui ada atau tidaknya antibodi komplet (Ig M) dan antibodi inkomplet (Ig G) dalam serum pasien (mayor) maupun dalam serum donor yang melawan sel pasien (minor).	
Kebijakan	Peraturan direktur no 908.2/I-PDM/DIR/VI/2022 tentang Pedoman pelayanan instalasi laboratorium Rumah Sakit Prima Husada	
Prosedur	A.CARA KERJA CROSSMATCH DENGAN DIAMED GEL I. Buat Suspensi Sel Os & Donor 0,8 – 1 % Cara : 1. Masukkan 0,5 ml Diluent 2 dengan dispenser kedalam tabung 2. Ambil 5 ul (mikroliter) PRC atau 10 ul WB à Masukkan tabung 3. Campur dan homogenkan à suspensi 0,8 – 1 % II. Ambil Liss / Coombs Card, tandai dengan identitas Os / Donor, buka penutup alumunium. Dengan bantuan mikropipet, masukkan : a) MAYOR : 50 ul Suspensi Sel Donor + 25 ul Serum Os b) MINOR : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Donor c) AC : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Os III. Masukkan Kartu Ke Inkubator Inkubasi 37°C, 15 menit (Tekan tombol Timer 1/2/3) IV. Pindahkan kart uke centrifuge Tekan tombol start (Centrifuge selama 10 menit) V. Baca reaksi secara makroskopis B.CARA KERJA DIRECT COOMBS TEST 1. Buat suspense Os 0,8 – 1% (cara sama seperti diatas) 2. Ambil Liss / Coombs Card, tandai dengan identitas Os	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	CROSSMATCH		
	No. Dokumen 1373.4/I-SPO/DIR/XI/2024	No. Revisi 00	Halaman 2 / 1

	3. Masukkan 50 ul Suspensi Sel Os 4. Putar di Centrifuge (Tekan tombol Start) 5. Baca Reaksi C.PIPETTING  D.CARA POOLING UNTUK CROSS MATCH MINOR I. Maksimum Pooling Minor untuk 3 (Tiga) kantong darah donor II. Cara Pooling : 1. Potong selang pada kantong donor yang akan di Pooling 2. Teteskan pada tabung kosong dengan jumlah yang sama, serum/plasma 3. Lakukan Cross Match seperti biasa : a) MAYOR 1 : 50 ul Suspensi Sel Donor 1 + 25 ul Serum Os b) MAYOR 2 : 50 ul Suspensi Sel Donor 2 + 25 ul Serum Os c) MAYOR 3 : 50 ul Suspensi Sel Donor 3 + 25 ul Serum Os d) MINOR POOL : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Pooling E.CARA POOLING UNTUK INTER CROSS DONOR Maksimum pooling untuk 3 kantong darah Cara Pooling : a) Potong selang pada kantong donor yang akan di pooling b) Teteskan pada 2 tabung kosong masing-masing sel darah merah donor dan serum/plasma donor dengan jumlah yang sama c) Homogenkan sel darah merah pada tabung yang berisi pooling sel darah merah donor, buat suspense 1% dengan Diluent 2 dengan cara seperti di atas d) Lakukan Cross Match seperti biasa : INTER CROSS : 50 ul pool suspense sel donor + 25 ul pool serum donor
Unit Terkait	Petugas BDRS