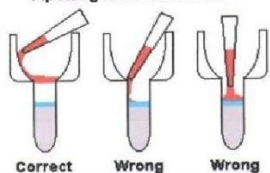
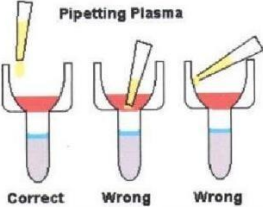


 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CROSSMATCH		
	No. Dokumen 552.136/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 02 Juni 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Proses <i>Crossmatch</i> adalah pemeriksaan utama yang dilakukan sebelum transfusi yaitu memeriksa kecocokan antara darah pasien dan donor sehingga darah yang diberikan benar-benar cocok.		
Tujuan	Untuk mengetahui apakah sel darah merah donor bisa hidup di dalam tubuh pasien, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya antibodi komplit (Ig M) dan antibodi inkomplit (IgG) dalam serum pasien (mayor) maupun dalam serum donor yang melawan sel pasien (minor).		
Kebijakan	Peraturan Direktur Nomor 536/I-PDM/DIR/V/2025 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Prima Husada.		
Prosedur	A.CARA KERJA CROSSMATCH DENGAN DIAMED GEL 1. Buat Suspensi Sel Os & Donor 0,8 – 1 % Cara : a. Masukkan 0,5 ml diluent dengan mrnggunakan dispenser kedalam tabung b. Ambil 5 ul (mikroliter) PRC atau 10 ul WB lalu Masukkan tabung c. Campur dan homogenkan suspensi 0,8 – 1 % 2. Ambil Liss / Coombs Card, tandai dengan identitas Os / Donor, buka penutup alumunium. Dengan bantuan mikropipet, masukkan : • MAYOR : 50 ul Suspensi Sel Donor + 25 ul Serum Os • MINOR : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Donor • AC : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Os 3. Masukkan kartu ke inkubator Inkubasi 37°C, 15 menit (Tekan tombol Timer 1/2/3) 4. Pindahkan kartu ke centrifuge Tekan tombol start (Centrifuge selama 10 menit) 5. Baca reaksi secara makroskopis B.CARA KERJA DIRECT COOMBS TEST a. Buat suspense Os 0,8 – 1% (cara sama seperti diatas) b. Ambil Liss / Coombs Card, tandai dengan identitas Os		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CROSSMATCH		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 552.136/I-SPO/LAB/VI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	c. Masukkan 50 ul Suspensi Sel Os d. Putar di Centrifuge (Tekan tombol Start) e. Baca Reaksi C.PIPETTING Pipetting Red Blood Cells  Pipetting Plasma  D.CARA POOLING UNTUK CROSSMATCH MINOR I. Maksimum Pooling Minor untuk 3 (Tiga) kantong darah donor II. Cara Pooling : 1. Potong selang pada kantong donor yang akan di Pooling 2. Teteskan pada tabung kosong dengan jumlah yang sama, serum/plasma 3. Lakukan Cross Match seperti biasa : • MAYOR 1 : 50 ul Suspensi Sel Donor 1 + 25 ul Serum Os • MAYOR 2 : 50 ul Suspensi Sel Donor 2 + 25 ul Serum Os • MAYOR 3 : 50 ul Suspensi Sel Donor 3 + 25 ul Serum Os • MINOR POOL : 50 ul Suspensi Sel Os + 25 ul Serum Pooling E.CARA POOLING UNTUK INTER CROSS DONOR Maksimum pooling untuk 3 kantong darah Cara Pooling : a. Potong selang pada kantong donor yang akan di pooling b. Teteskan pada 2 tabung kosong masing-masing sel darah merah donor dan serum/plasma donor dengan jumlah yang sama c. Homogenkan sel darah merah pada tabung yang berisi pooling sel darah merah donor, buat suspense 1% dengan Diluent 2 dengan cara seperti di atas d. Lakukan Crossmatch seperti biasa : INTER CROSS : 50 ul pool suspense sel donor + 25 ul pool serum donor		
Unit Terkait	1. BDRS		