



**BERITA ACARA INSTAL ALAT
NOMOR : 1221/RSPHS/I-BAC/LAB/XII/2023**

Pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tersa Donara Wulan, Amd. Kes
Jabatan : PJ K3 Laboratorium

Berikut laporan alat MiniVidas :

1. alat dibawa teknisi pada hari kamis 14 desember 2023, pihak vendor PT Enseval Medika Prima mengantarkan alat minividas dan di lakukan install pada hari tersebut. Kemudian direncanakan untuk training alat pada hari berikutnya yaitu tanggal 15 – 16 desember 2023.
2. pada tanggal 15 desember dilakukan training alat yang diikuti oleh peserta lab, kabid, dan Atem RS Prima Husada Sukorejo dan dilakukan Pre-test. Dan juga alat minividas sudah dilakukan control dan kalibrasi alat sehingga alat sudah bisa digunakan untuk pemeriksaan TSH, FT4, dan Troponin I.
3. Pada tanggal 16 desember 2023, dilakukan training alat kembali dan dilakukan posttest dihari akhir training. Staff laboratorium mendapatkan sertifikat yang digunakan untuk bukti bahwa telah mengikuti training.

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pj Alat Laboratorium

Tersa Donara Wulan, A.Md.Kes

Pasuruan, 15 Desember 2023
Kepala Laboratorium

Elza Safarina Ulfa, Amd.AK

Kabid Penunjang RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ham Dwika Putri

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS



Dokumentasi :





Jl. Pulolentut No. 12 Lt. 1-Unit 1C, Lt. 2-Unit 2A
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13920 - Indonesia
P / +62.21 4682 3234 F / +62.21 4682 2413
www.emp.co.id

APPLICATION SPECIALIST REPORT

CUSTOMER : ESPH Sukorejo DATE : 15-16 Des 2023
ADDRESS : Jl. Raya Surabaya-Malang
KM 19,1 km Malang
Sukorejo - Probolinggo
PIC : _____
PHONE NO : _____
FAX NO : _____

☒ TRAINING ☐ RETRAINING
☐ CLINICAL MEETING RTD / VISIT ☐ RETRAINING 1
☐ DEMO / TRIAL / EVALUASI / VALIDASI ☐ WORKSHOP
☐ PKPS ☐ TROUBLESHOOTING
☐ PRESENTASI /WORKSHOP/SEMINAR

NO	INSTRUMENT/BRAND	SERIAL NO	SOFTWARE VERSION
	<u>Nin. Uidas</u>	<u>VD1205210</u>	<u>FW-04: 1.13</u>
			<u>Scout: 2.81</u>

MATERI :

- ☐ Pengenalan pemeriksaan / alat
- ☒ Persiapan alat
- ☒ Persiapan reagensia
- ☒ Persiapan sampel
- ☒ Persiapan kalibrasi
- ☒ Persiapan kontrol
- ☒ Running sampel
- ☐ Prosedur pengenceran
- ☐ Interpretasi hasil
- ☐ Prosedur khusus pemeriksaan
- ☒ Troubleshooting
- ☒ Maintenance

LAIN - LAIN :

Assay
① PTAM ke kalibrasi kontrol on: 13/12
② +SN 0 - 2 - 10 - 100 : 11/12/23
③ +NHS - 2 - 10 - 100 : 11/12/23

CATATAN :

APPLICATION SPECIALIST

CUSTOMER CHOP AND SIGNATURE

NOTULEN TRAINING ALAT LABORATORIUM “MINIVIDAS”

HARI / TANGGAL : JUMAT, 15 Desember 2023 (Hari Pertama – I)
 JAM : 13.00 - selesai
 ACARA : Training Minividas
 TEMPAT : Laboratorium

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Pre-test	a. pre-test	1. sebelum melakukan pengenalan alat dilakukan pre-test terlebih dahulu.	Seluruh Staff lab
2.	Training Alat miniVidas	a. <i>Pengenalan alat</i>	a. miniVidas Overview 1. Section : minividas memiliki 2 section A dan section B yang berfungsi sebagai indicator yang menunjukkan running sample, eror dan bila alat tidak digunakan (posisi standby). 2. Reagen Strip tray : tempat untuk meletakkan reagen strip yang diisi standart/control/sample. 3. SPR Block : tempat untuk meletakkan reagen SPR. 4. Strip Preparation Tray : Tempat untuk meletakkan reagen strip yang akan digunakan bila kedua section sedang digunakan. 5. Keypad anda screen : tempat untuk melakukan identifikasi tes yang akan dirunning. 6. Thermal Printer : tempat thermal paper dan print out hasil pemeriksaan 7. Barcode reader : digunakan untuk membaca barcode sampel, MLE maupun untuk mengupdate vidas protocol parameter yang belum terinstal didalam alat.	Seluruh Staff lab
		b. <i>Cara Menghidupkan Minividas</i>	1. Nyalakan UPS 2. Tekan power switch yang ada dibagian belakang alat. 3. alat akan melakukan inisialisasi +/- 10 menit 4. pada layar akan ada tampilan menu utama 5. cek suhu SPR dan Reagen tray (suhu 37°C +/- 0,7 °C)	Seluruh Staff lab

			- dari menu utama, pilih "start section" - kemudian pilih "display temperature". 6. setelah suhu mencapai optimum, matikan alat dan nyalakan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengadjust solid standart yang ada didalam alat pada suhu optimum.	
		c. Cara mematikan Minividas	1. pastikan ke menu utama 2. Pastikan tidak ada lagi test yang terpending 3. Pastikan tidak ada SPR yang tertinggal di SPR blok 4. pastikan tidak ada reagen strip yang tertinggal di reagent tray. 5. tekan power ke posisi switch Off yang terdapat dibelakang alat.	Seluruh Staff lab
		d. Cara membaca barcode MLE	1. siapkan reagen kit box 2. pada menu utama tekan master Lot menu 3. Pilih scan Master Lot 4. Can barcode MLE yang terdapat pada kit box dengan menggunakan scanner barcode. 5. setelah berhasil pembacaan MLE , alat akan mengeprint data MLE 6. pilih list master Lots 7. cocokan No Lot yang tertera pada layer dengan data print out pembacaan MLE.	Seluruh Staff lab
		e. Cara menjalankan standart dan Control	1. Pili menu status screen 2. pilih section yang dikehendaki 3. pilih posisi A1 4. pilih Assay 5. pilih parameter S1/S2 dan C1 6. Tekan back/previous screen 7. tekan tombol start 8. lampu section akan menyala berwarna hijau, tanda pemeriksaan sedang berlangsung 9. lampu section berwarna hijau berkedip-kedip dan keluar hasil print out.	Seluruh Staff lab
		f. Cara Update Protocol	1. pilih menu "utility menu" 2. Pilih menu assay update dan tekan ssay update	Seluruh Staff lab



			3. pada monitor tampilan pih yes 4. scan barcode 1 dan 2 vidas protocol yang terdapat di package insert 5. kemudian tekan "comfirm to quit"	
		g. Cara mendaftarkan sampel pasien	1. pilih status screen 2. pilih section yang dikehendaki A/B 3. pilih posisi strip reagen missal A1 4. Pilih assay 5. pilih select kode assay 6. sample ID 7. Masukkan identitas sampel 8. tekan tombol enter 9. tekan tombol previous screen 10. tekan parameter pemeriksaan 11. tekan start, tunggu hasil selesai.	Seluruh Staff lab
		h. pemeriksaan yang digunakan miniVidas	1. Free T4 2. TSH 3. Troponin I	Seluruh Staff lab
		i. Trial pengerjaan control, kalibrasi dan pengerjaan sampel pasien.	1. pada pemeriksaan TSH,FT4, dan Troponin sudah dilakukan control dan kalibrasi. 2. alat sudah bisa digunakan untuk pemeriksaan TSH,FT4 dan Troponin I.	Seluruh Staff lab

Pimpinan Rapat

(dr. Ham Dwika Putri)

Notulis

(Tersa Donara Wula,A.Md.Kes)

Mengetahui,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS

LAMPIRAN DOKUMENTASI :

HARI PERTAMA – DAY 1





NOTULEN TRAINING ALAT LABORATORIUM “MINIVIDAS”

HARI / TANGGAL : SABTU, 16 Desember 2023 (Hari Kedua – II)
JAM : 10.00 - selesai
ACARA : Training Minividas
TEMPAT : Laboratorium

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Training Alat miniVidas	<i>a. Trouble shooting</i>	Dari PT EMP sudah disediakan SOP dari alat miniVidas dan dilengkapi instruksi kerja, maintenance alat, trouble shooting. Jadi ketika ada eror bisa ditanggulangi dengan instruksi kerja terlebih dahulu sebelum pemanggilan teknisi.	Seluruh Staff lab
		<i>b. maintenance rutin</i>	Maintenance rutin yang terdiri dari pembersihan rutinan yang dilakukan staff laboratorium diluar calibrasi alat yang dilakukan oleh vendor alat.	Seluruh Staff lab
		<i>c. Post test training alat</i>	Setelah dilakukan sosialisasi dan training alat staff laboratorium diwajibkan mengikuti post test yang di gunakan untuk bukti bahwa staff telah mengikuti kegiatan training alat miniVidas.	Seluruh Staff lab
		<i>d. alat sudah dilakukan trial</i>	Alat sudah bisa digunakan untuk pemeriksaan TSH,FT4 dan Troponin I.	Seluruh Staff lab

Pimpinan Rapat

(dr. Ham Dwika Putri)

Notulis

(Elza Safarina Ulfa,A.Md.AK)


Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada Sukorejo

dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS



LAMPIRAN DOKUMENTASI :

HARI KEDUA – DAY 2

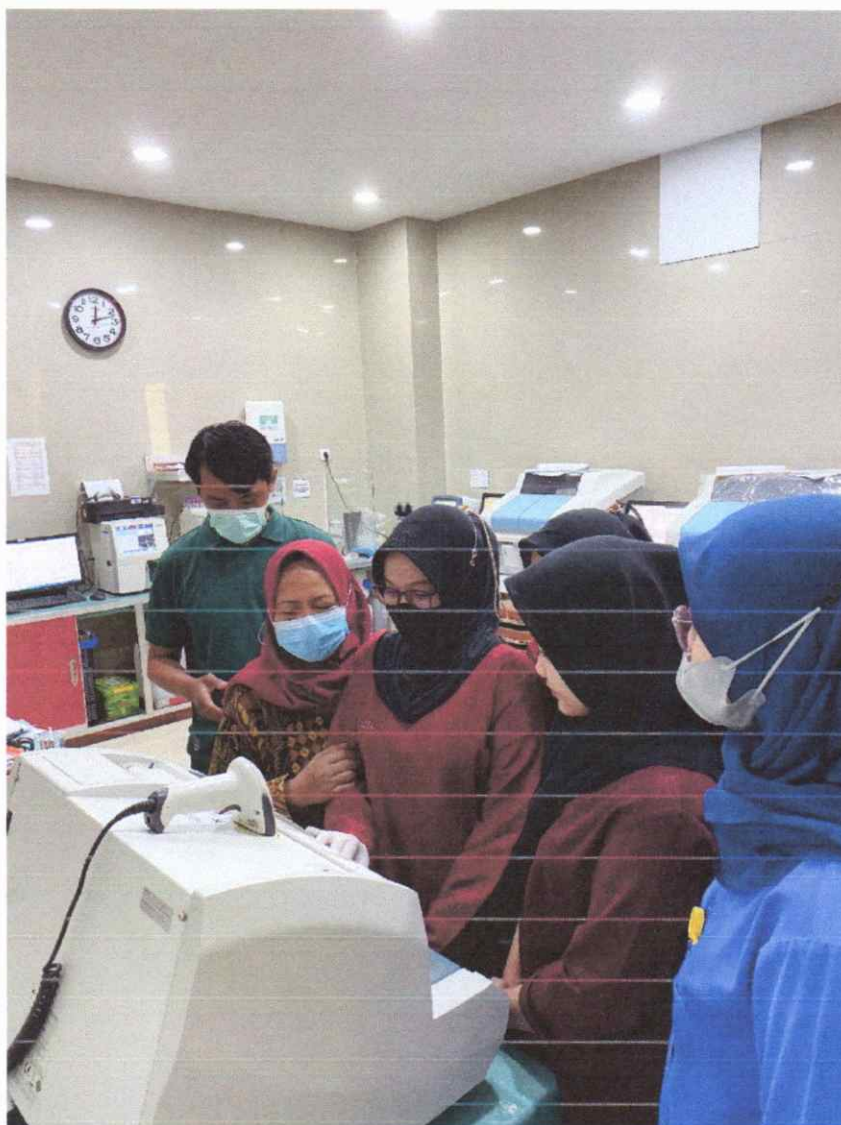



RSPH: Sukorejo
Training Area: Vidas

Trainer

Customer

(.....)

ASF - 016/08/2015 - Rev 00