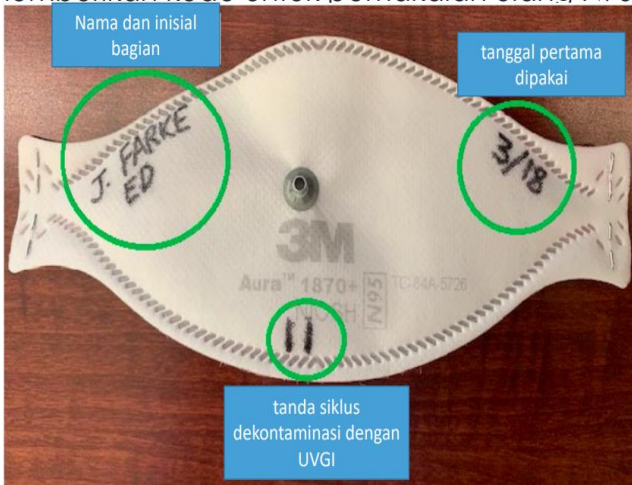


 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN KEMBALI MASKER N95		
	No.Dokumen 337.22/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 1 / 2
STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 9 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Kegiatan penggunaan kembali masker N95 lebih dari satu kali, dengan fungsi yang sama dan melauai proses penyimpanan yang sesuai.		
Tujuan	Mempertahankan nilai guna dan meminimalkan pemakaian masker berlebih.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 325.4/I-PDM/DIR/IV/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.		
Prosedur	Perlengkapan: - Masker N95 - Handrub - Kantong coklat berpori - Lampu UV - Spidol permanen Penggunaan: - Pastika sudah memberi nama masker di bagian depan masker N95 dengan spidol. (sebelum dipakai)  - Gunakan pelindung wajah yang bersih atau masker bedah sebagai pelapis untuk melindungi masker N95 dari kontaminasi. - Perlakukan masker N95 habis pakai sesuai kondisi masker: - Buang masker N95 bila telah digunakan untuk suatu prosedur yang menggunakan dan menghasilkan bahan aerosol. - Buang masker N95 bila terkontaminasi dengan darah, cairan hidung, atau cairan tubuh lainnya dari pasien. - Masker yang masih terlihat bersih di disimpan dan disterilkan dengan UV/mesin pemanas kering. Penyimpanan: - Lakukan cuci tangan dengan handrub saat akan melepas masker N95. - Jangan memegang bagian depan masker, pegang tali		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MENYIMPAN DAN MENGGUNAKAN KEMBALI MASKER N95		
	No.Dokumen 337.22/I-SPO/PPI/IV/2025	No.Revisi 02	Halaman 2 / 2
	masker untuk melepas / menyimpan. 3. Jangan pula memegang bagian dalam masker dengan tangan yang kotor karena dapat terkontaminasi. 4. Gunakan kantong penyimpanan berpori yang bersih untuk menyimpan satu masker N95 yang telah digunakan oleh satu pengguna dan diberi label identitas pengguna yang jelas untuk menghindari kontaminasi silang. 5. Simpan kantong penyimpanan berpori yang berisi masker N95 pada wadah tertutup. 6. Kantong penyimpanan harus diganti setelah masker N95 dibuang atau dibersihkan secara teratur. 7. Lakukan penyinaran UV selama 30 menit atau dengan mesin pemanas kering suhu 70 C selama 30 menit. 8. Lakukan kebersihan tangan dengan cara handwash atau handrub sebelum dan sesudah menyentuh masker. 9. Hindari menyentuh bagian dalam masker N95. Jika menyentuh bagian dalam masker, maka lakukan kebersihan tangan.		
Unit Terkait	1. Unit pinere 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Laboratorium 5. Instalasi Radiologi 6. IGD 7. ICU 8. IKO		