

Jakarta, 13 Juni 2024

No : 0146/GJM/SLS/VI/2024
Perihal : Surat Permohonan Presentasi

Kepada Yth,
Direktur
RS Prima Husada Sukorejo
Jl. Raya Surabaya - Malang No.Km.54, Palang, Lemahbang,
Kec. Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur 67161

Dengan hormat,
Semoga bapak/ibu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan tugas pekerjaan dengan mudah.

Bersama surat ini perkenankan kami untuk memperkenalkan PT Global Jaya Medika sebagai perusahaan yang bergerak dalam distribusi alat kesehatan semenjak tahun 1962. Mewujudkan visi kami "Way of Health" dan komitmen PT Global Jaya Medika untuk selalu memberikan kualitas pelayanan terbaik. Kami merupakan *exclusive distributor* kepada semua produk yang kami ageni.

Mohon kiranya kami diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan informasi terkait produk yang kami ageni secara langsung kepada bapak/ibu sebagai berikut :

No.	Nama Alat / Type	Brand/Origin
1.	Neuro Audio Screen OAE	Neurosoft

Adapun waktu dan tempat presentasi dapat menyesuaikan dari pihak rumah sakit. Besar harapan kami permohonan ini mendapat persetujuan, untuk konfirmasi terkait presentasi dapat menghubungi Nur Ahyak '0821-5497-4145.

Demikianlah surat permohonan presentasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ade Rahma
Marketing Manager

NEURO-AUDIO-SCREEN

Portable Hearing Screening System for Newborns and Infants



- three-in-one: TEOAE, DPOAE and ABR
- user-friendly interface with touchscreen
- hearing screening in noisy environment
- ABR curve with wave V marker
- results printed on portable printer

HEARING
DIAGNOSTICS

TEOAE
DPOAE
ABR



WHY IS IT IMPORTANT?

Hearing loss is one of the most common congenital anomalies, occurring in approximately three infants of every thousand babies. About half of the children born with hearing loss have no known risk factors for it. Normal hearing in the first six months of life is also considered critical for speech and language skills. Early identification and appropriate intervention before six months of age allows a child with hearing loss to facilitate language acquisition and develop healthy speech.

Unfortunately, subjective methods have not proven to be reliable in detecting hearing impairments in the first months and years of baby's life.

That is why objective methods should be used. Measures of OAE or ABR have shown to be effective methods of screening for hearing loss in neonates and infants. Universal newborn hearing screening has become the expected standard of care internationally.

In addition, the majority of children suffer from middle ear infections that are the most common for infants and toddlers. In most cases otitis media can cause transient or fluctuating hearing loss. But persistent infection or persistent fluids in the middle ear may result in permanent hearing loss. It is recommended that a child's hearing should be checked repeatedly during each of the first years of life because hearing is central to a child's language development and communication.



TOUCHSCREEN
DISPLAY



CONFIGURATIONS

The device is supplied in one of two configurations:

- Neuro-Audio-Screen with all above-mentioned tests
- Neuro-Audio-Screen/OAE with TEOAE and DPOAE tests only

The second configuration variant can be easily upgraded to full-featured one.

NEUROSOFT AUDIOLOGY PRODUCT LINE

Neuro-Audio



Audio-SMART



Neuro-Audio-Screen



aScreen



APPLICATION

Clinical ABR&OAE analyzer

Diagnostic/screening ABR&OAE and middle ear analyzer

Diagnostic/screening ABR&OAE analyzer

OAE screening

TESTS

ABR, MLR, LLR, ECoG, VEMP, ASSR, P300, MMN, PTA, TEOAE, DPOAE, SOAE

Tympanometry, AR, AR decay, ETF, TEOAE, DPOAE, ABR

TEOAE, DPOAE, AABR, ABR

TEOAE, DPOAE

HARDWARE

PC-based

Portable standalone

Portable standalone

Portable smartphone-based



Neurosoft

www.neurosoft.com, com@neurosoft.ru
Phones: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Fax: +7 4932 24-04-35
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia

LIST OF TESTS

TEOAE

Advanced algorithm of artifact rejection improves the instrument ability to perform test in difficult-to-test conditions. If you found that conditions change during testing you can easily restart test just by tapping one button. Along with PASS/REFER result, you get more information for diagnostic purpose: response waveform, spectrum, graphic presentation of SNR in different bands, etc.

DPOAE


This test allows obtaining results in noisy conditions. You can perform not only screening but also diagnostics with up to 12 frequencies. Response spectrum, residual noise and estimated DP level for each frequency is available for evaluation. The high frequency DP (up to 12 kHz) can be useful for evaluation of patients in process of ototoxicity treatment.

AABR

If you use only OAE test for screening, some impaired patients (for example, with auditory neuropathy spectrum disorder) will be missed. That's why automated ABR screening is required in some cases (for example, in neonatal intensive care unit). High stimulus repetition rate and run-time compensated Chirp stimuli guarantee fast response detection time. Advanced algorithm of response analysis in frequency domain allows detecting automatically the response in difficult conditions with high electromagnetic interference. The device has switchable input. It will automatically switch to the correct position if mastoid montage is used. So you don't care on repositioning of electrodes during testing.

ABR

If you get REFER result during screening test, you need to make ABR test to specify the diagnosis. You can do it with the same instrument. You can record ABR curves with several stimulus levels per test sequence, set wave V marker to measure latencies, generate intensity-latency table. Multi-touch feature of the screen allows zooming curves easily when finding ABR waves. Optional headphones can be used to stimulate with high stimulus levels.

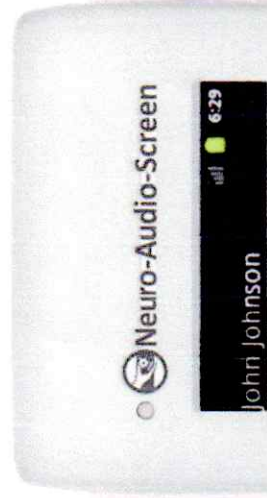

NEURO-AUDIO-S-

Neuro-Audio-Screen Manager software a with Neuro-Audio-Screen device.

The program maintains a single database


- all patients and exams are in one database
- flexible search options
- automatic data backup
- trashcan for secure removal of patients

Neuro-Audio-Screen Manager software is



DATA DOWNLOADING VIA BLUETOOTH
OR FROM MICRO SD CARD

UPLOADING PATIENT LISTS
PRINTING OF REPORTS

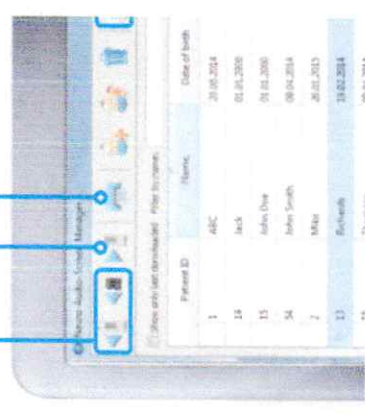

NEURO-AUDIO-SCREEN ADVANTAGES



CUSTOMIZABLE SETTINGS

You can adjust test settings using only one button. For example, you can use different modes of OAE test: "Screening", "Noisy (screening)", etc. It allows customizing settings quickly in order to perform any hearing exam starting from screening in a noisy room and up to expert study in a specialized hospital.



COMPATIBILITY OF DATA FORMAT WITH NEURO-AUDIO DIAGNOSTIC OAE AND EP SYSTEM

provides continuity of diagnostic information obtained during hearing screening and during specialized diagnostic study.



VIDEO GUIDE

Detailed video guide supplied with device demonstrates Neuro-Audio-Screen tests and to work with the program. It allows all user even without special training to master the functions quickly.

DEVICE USABILITY

The large color display allows showing the data and controlling

